

Wasserstoff-Forschung

MITTELS THERMISCHER ANALYSE



Wasserstoff – der Kraftstoff der Zukunft

Wasserstoff (H_2) gilt als zukunftssträchtige Energiequelle. Er ist ein vielseitiger und sauberer Energieträger, der aus einer Vielzahl an Quellen, darunter auch erneuerbare Energien wie Wind und Sonne, gewonnen werden kann. H_2 wird auch eingesetzt, um hohe CO_2 -Emissionen aus Metallgewinnungsverfahren durch die direkte Reduktion von Substanzen wie z. B. Eisenerz zu verringern. Obwohl die Erzeugung, Speicherung und Umwandlung von Wasserstoff einen gewissen technologischen Stand erreicht haben, gibt es noch Raum für Verbesserungen und neue Entdeckungen. Die Thermische Analyse kann hier zu einem besseren Verständnis der Wechselwirkungen zwischen den Materialien beitragen.

Herausforderungen bei der Wasserstoffnutzung

Wasserstoff birgt ein erhebliches Entzündungsrisiko und unterliegt besonderen Sicherheitsvorkehrungen bei der Herstellung, Handhabung und Verwendung. Bereits geringe Konzentrationen von Wasserstoff sind als kritisch anzusehen, da bereits 4 % Wasserstoff in Luft bei Raumtemperatur zur Entzündung führen kann.

Thermische Analyse und Wasserstoff

NETZSCH bietet die Möglichkeit, Materialien unter Wasserstoffatmosphäre zu messen sowie ein entsprechendes Sicherheitskonzept. Die Messungen können in einer 100%-igen Wasserstoffatmosphäre oder an einer Mischung mit anderen nicht brennbaren Gasen wie Stickstoff (N_2) oder Argon (Ar) durchgeführt werden. Bei Auftreten einer Störung wird das Gerät mit Inertgas geflutet.

Durchführung von Reduktions- und Oxidationstests in einer sicheren Umgebung

Die Reduktion wird in einer Vielzahl an industriellen Prozessen eingesetzt, wie beispielsweise metallurgischen Prozessen und der Speicherung und Freisetzung von Wasserstoff in bestimmten Materialien. Jede STA 449 kann für den Betrieb mit Wasserstoffgas ausgerüstet werden. Neben dem Reduktionstest bietet NETZSCH auch den Oxidationstest unter Luftatmosphäre an. Dazu muss die STA in einem Zwischenschritt mit Inertgas gespült werden, bis sichere Bedingungen für den Gaswechsel erreicht sind. NETZSCH bietet das STA 449-Wasserstoffsystem als Komplettlösung inklusive der neu entwickelten H_2 Secure-Box an.

STA 449

H₂Secure-Konzept

Definiertes H₂-Gasvolumen

Der Wasserstoff wird von oben in den Ofen eingeleitet und bleibt auf einen definierten Raum über dem kontinuierlich gespülten Wägeraum begrenzt.

Überwachung der Gaskonzentrationen

Die H₂ und O₂-Konzentrationen werden kontinuierlich gemessen, um eine sichere Handhabung zu bieten.



H₂Secure-Box

Die zentrale H₂Secure-Kommunikationsbox empfängt Informationen über die Gaskonzentration und regelt die Freigabe der Gase auf Grundlage der festgelegten Grenzwerte.

Ausfallsicherheit

Im Fall eines Stromausfalls öffnen sich die Magnetventile und setzen ein Inertgas frei, das den Wasserstoff aus dem System spült.


AUFBAU



- 1 Wasserstoff-Gasversorgung**
Wasserstoff kann durch einen H₂-Generator oder eine H₂-Flasche bereitgestellt werden. Er wird an den speziellen H₂-Gaseinlass auf der STA-Rückseite über integrierte Sicherheitsventile angeschlossen.
- 2 Optimierter Gasweg**
Er sorgt für eine präzise Gaskonzentration im Ofen, z. B. bis 100% Wasserstoff und gleichzeitig für eine Schutzgasatmosphäre im Waagenbereich.
- 3 Kontinuierliche Überwachung der Gaskonzentration**
Der STA-Auslassgasstrom wird kontinuierlich auf H₂- und O₂-Konzentration überwacht.
- 4 H₂Secure-Box**
Die zentrale Kommunikationsbox steuert die Freigabe oder Sperrung von Gasflüssen abhängig von den festgelegten H₂- oder O₂-Grenzwerten.

Die reversible Natur von Kupfer – Redoxreaktion von Kupferoxid


Hier ist ein Zyklusexperiment gezeigt zur Untersuchung der reversiblen Reaktion von Kupferoxid mit Wasserstoff und Luft, wobei die Massenänderungen während des gesamten Prozesses überwacht werden. Zunächst wird Kupferoxid in einer Wasserstoffatmosphäre reduziert, und es entsteht metallisches Kupfer. Anschließend oxidiert das metallische Kupfer in einer oxidierenden Umgebung unter Zufuhr von Luft wieder zu Kupferoxid. In den folgenden Zyklen ist ein zunehmender Verlust des Oxidationspotenzials zu beobachten, ein Hinweis auf die Abnahme der katalytischen Leistung. Mit Hilfe der Thermogravimetrie können Forscher Einblicke in die Reaktionskinetik, die Mechanismen und die thermodynamischen Eigenschaften von Katalysatoren auf Oxidbasis gewinnen und so das Verständnis und die Optimierung katalytischer Systeme vorantreiben.

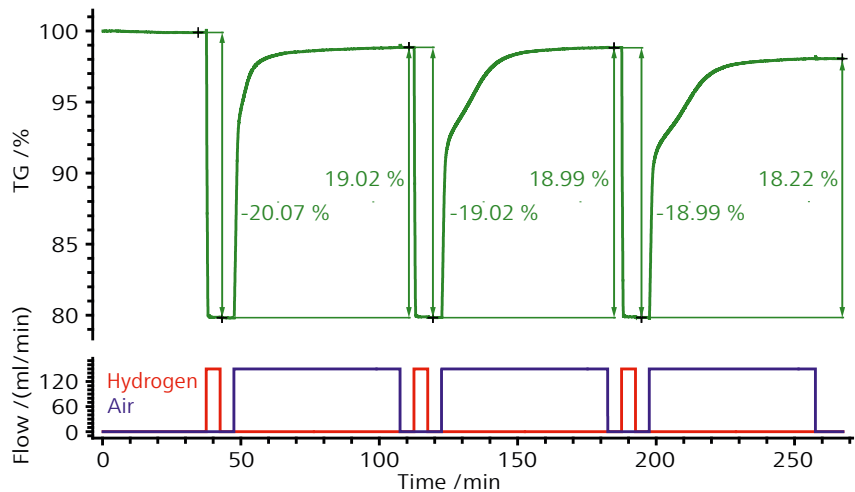

Thermogravimetrische Reduktions-Oxidation-Zyklen von 29,975 mg Kupfer(II)-oxid-Pulver bei 500 °C

Untersuchung der Absorption und Desorption von Wasserstoff in Gettern auf Zirkoniumbasis

Die Ansammlung von Wasserstoff stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da unter bestimmten Bedingungen Explosionsgefahr besteht. Um dies zu umgehen, spielen Wasserstoffabsorber, allgemein als Getter bezeichnet, eine entscheidende Rolle bei der Entfernung von Wasserstoff aus solchen Umgebungen. Mittels STA wurde ein Getter auf Zirkoniumbasis mit einer Rate von 10 K/min in reiner Wasserstoffumgebung analysiert und es wurde ein klarer Absorptions-Desorptionszyklus beobachtet. Der Prozess zeigte eine Reversibilität mit einer Hysterese von etwa 50 °C, was die Wirksamkeit des Getters bei der Entfernung von Wasserstoff und Erhöhung der Systemsicherheit belegt.

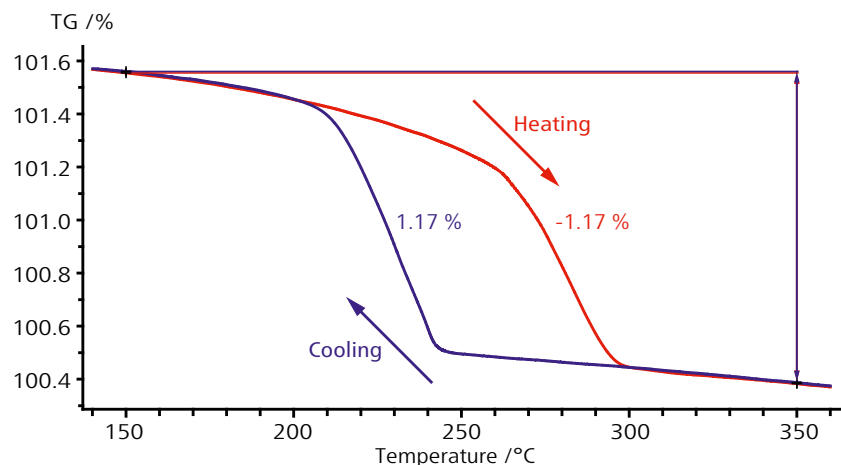

Massenänderung eines Getters auf Zirkoniumbasis (279,5 mg) während des Aufheizens und Abkühlens unter 100 % H₂-Atmosphäre

Applikationen und Performance

Technische Daten

STA 449 + H ₂ Secure-Box	
Ofentyp, der H ₂ -Messungen unterstützt	SiC
Temperaturbereich	RT bis 1600 °C
Sensortypen*	<ul style="list-style-type: none">▪ TG▪ TG-DTA▪ TG-DSC
Thermoelementtypen*	<ul style="list-style-type: none">▪ P▪ S▪ B
Sensortyp nur für Reduktionstest	W
Optionaler 4-fach MFC	Wechsel zwischen Wasserstoff- und Luftatmosphäre in einer Messung möglich
Wasserstoffversorgung	Bereitstellung durch Anwender, z. B. Wasserstoff-generator, H ₂ -Flasche
H ₂ - und O ₂ -Messzelle	Enthalten
H ₂ Secure-Box	Enthalten
Optionale Gasauslassbehandlung	H ₂ -Verdünnung
Upgrade für bestehende STA 449	✓

* Möglichkeit einer verkürzten Lebensdauer je nach Versuchsparametern

NETZSCH-Gerätebau GmbH
Wittelsbacherstraße 42
95100 Selb
Deutschland
Tel.: +49 9287 881-0
Fax: +49 9287 881 505
at@netsch.com

NETZSCH[®]

www.netsch.com